

Mepilex® XT

Innovativer Schaumverband für alle Wundphasen

Polyurethanschaum

- Verbessertes Exsudatmanagement
- Gut funktionsfähig unter Kompression^{4,6}
- Anpassungsfähiger und flexibler Schaum mit Exsudat-Kanälen:
Absorbiert auch zähflüssiges, eiweißhaltiges Exsudat⁶



Safetac®- Beschichtung

Polyurethanfolie

- Atmungsaktiv
- Barriere gegen Viren und Bakterien (> 25 nm)⁸


Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut^{1,2}

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde¹



- Verbessertes Exsudatmanagement – geringeres Risiko von Leckagen und Mazeration^{4,5}
- Exsudat-Kanäle ermöglichen eine effektive Aufnahme jeder Exsudat-Art^{4,6}
- Für alle Wundphasen geeignet
- Hervorragende Anpassung an die Körperkonturen⁷ – hoher Tragekomfort

Anwendungshinweise

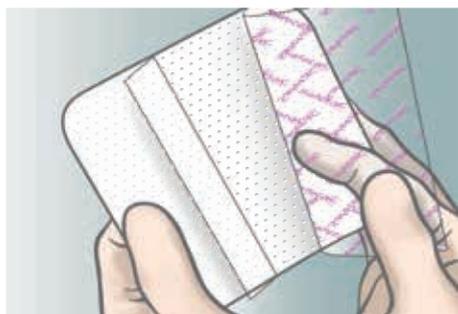

1. Wunde gemäß den üblichen Verfahren reinigen. Wundumgebende Haut gründlich trocknen. Schutzfolie abziehen.



2. Für ein optimales Ergebnis sollte Mepilex XT bei den kleineren Größen (bis 10 x 10 cm) mindestens 1–2 cm, bei den größeren Größen 5 cm der wundumgebenden Haut bedecken, um die Haut vor Mazeration und Skin Stripping zu schützen und den Verband sicher zu fixieren. Bei Bedarf kann Mepilex XT zugeschnitten werden. Den Verband nicht dehnen.



3. Mepilex XT mit Tubifast oder anderweitig fixieren.

So funktioniert Mepilex® XT

Mepilex XT ist ein weicher und äußerst anpassungsfähiger Schaumverband, der ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Dank der wundseitigen Kanäle werden alle Arten von Exsudat effektiv aufgenommen. Safetac versiegelt die Wundränder, verhindert das Austreten von Exsudat auf die wundumgebende Haut und minimiert so das Mazerationsrisiko. Safetac ermöglicht zudem einen Verbandwechsel, ohne dass die Wunde oder die umgebende Haut geschädigt oder der Patient zusätzlichen Schmerzen ausgesetzt wird.

Vorteile von Mepilex® XT

- Exsudat-Kanäle ermöglichen die erfolgreiche Aufnahme aller Exsudat-Arten, und minimieren so das Mazerationsrisiko
- Anwendung in allen Heilungsstadien möglich
- Kein Verrutschen, einfache Anwendung „ohne dritte Hand“⁶
- Gut geeignet für die Anwendung unter Kompression
- Über mehrere Tage tragbar, abhängig vom Zustand der Wunde^{2,9}
- Anheben und Repositionieren ohne Verlust der Haftenhaftigkeit möglich
- Nicht allergen¹⁰

Anwendungsgebiete

Mepilex XT ist für eine Vielzahl akuter und chronischer Wunden in allen Heilungsstadien¹¹ vorgesehen, z.B. Ulcus cruris, diabetische Fußulcerationen, Dekubitus und traumatische Wunden. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5
21 13 00	15 x 15 cm	07 05 23 59	5
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2

Steril – einzeln verpackt

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung
21 10 15	5 x 5 cm	5
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5
21 12 10	10 x 21 cm	5
21 13 10	17,5 x 17,5 cm	5
21 14 10	21 x 22 cm	5
21 15 00	20 x 50 cm	2

Steril – einzeln verpackt

REFERENZEN: 1. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 2. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 3. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012. 4. Fluid handling and retention properties Mepilex XT: Bericht 20130123-006 (SMTL). 5. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 6. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Bericht 20130104-004/20121012-004/20130104-004 [MHC]. 7. Meuleneire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WUWHS 2008. 8. Externer Testlaborbericht 413098 (Nelson Laboratories). 9. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001. 10. Biocompatibility Evaluation, archiviert in MHC. 11. Lantin, A., Diegel, C., Scheske, J., Schmitt, C., Bronner, A., Burkhardt, S. Use of a new foam dressing with soft silicone in German specialist wound care centres. E-poster presentation at European Wound Management Association conference, London, UK, 2015.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® XT sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0056

