

Compat ella®

Compat Ella® Spike Set

Das Compat Ella® Spike Set ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Arzneimitteln bestimmt und ist für die Verwendung mit der Compat Ella® Ernährungspumpe geeignet.

Funktionen auf einen Blick

Das Compat Ella® Spike Set umfasst einen ENPlus Ernährungskonnektor, einen mit ENFit® kompatiblen 3-Wege-Medikamentenport und ein ENFit® distales Ende (patientenseitiger Sondenanschluss).


Zuverlässige Ernährung: Das Compat Ella® Spike Set ist mit der patentierten zuverlässigen Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Technologie ausgestattet. AAFF ist in die Kassette integriert und wird immer automatisch aktiviert, um **die Patientensicherheit zu gewährleisten**.

Sichere Konnektoren: Das Compat Ella® Spike Set enthält ENFit® Konnektoren gemäß ISO 80369-3 und einen ENPlus Konnektor gemäß ISO 18250-3. ENFit® und ENPlus-Konnektoren sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Sichere Materialien: Das Compat Ella® Spike Set ist **steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei***.

Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus
- Enterale Ernährungssonden: ENFit®
- Spritzen: ENFit®

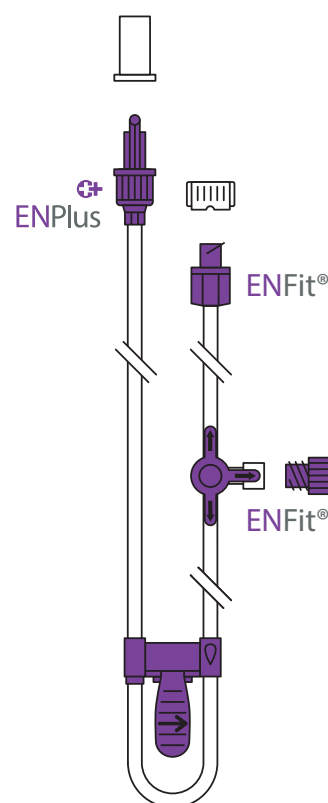


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	PZNr.	Anzahl/VE
Compat Ella® Spike Set	12298203	4746009	30

Kennen Sie schon Compat Ella®?

Compat Ella® Spike Set

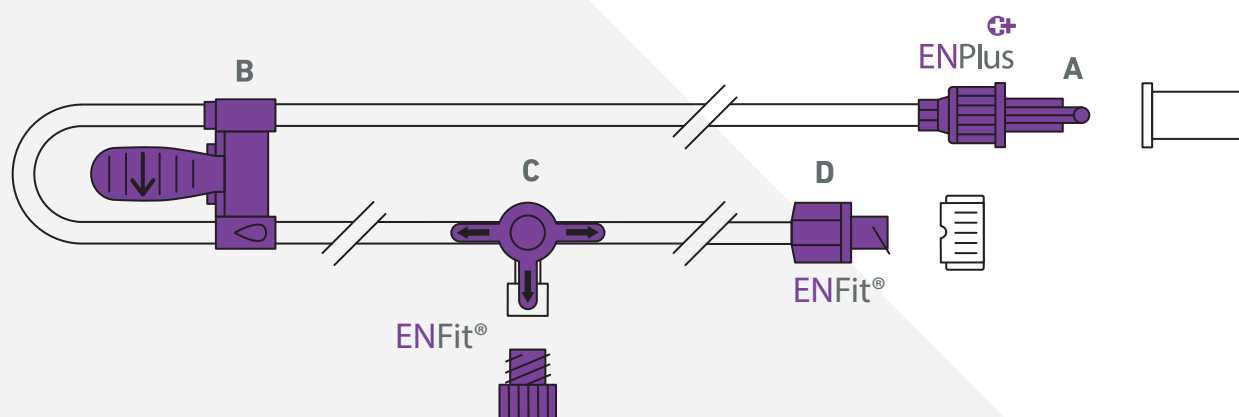

Komponenten

- A** ENPlus ‚nur enteraler‘ Konnektor (Ernährungskonnektor) mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- B** Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion
- C** ENFit® kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- D** ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (29,5 x 26 x 19 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Länge:	Abstand vom Ernährungskonnektor zum patientenseitigen Sondenanschluss: 230 cm. Abstand vom Ernährungskonnektor zur Pumpe: 50 cm.
Durchmesser:	Nenn-Innendurchmesser: 3,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 4,15 mm.
ISO-Norm:	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse IIa.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC und Silikon. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und latexfrei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

AXI00405 REV.0 17. JUNI 2021

Compat®