

# Cutimed® Siltec® B

## Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand: Zuverlässiger Halt, auch bei stärkeren Bewegungen

### Produkt


Cutimed® Siltec® B ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis starke Exsudatmengen.

Der Silikon-Haftrand von Cutimed® Siltec® B sorgt für eine schonende und dennoch sichere Haftung der Wundaufgabe. Durch den Verzicht einer Sekundärfixierung ist ein einfaches Anlegen und sicheres Applizieren möglich, wodurch eine Kosten- und Zeitersparnis generiert werden kann. Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed® Siltec® Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus. Mit seinem Silikonfilm auf der Wundkontaktseite bietet Cutimed® Siltec® B eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandwechsel. Für die patientenindividuelle Versorgung ist Cutimed® Siltec® B zuschneidbar und zum Duschen geeignet.

Cutimed® Siltec® B besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem Silikonfilm inkl. Haftrand. Cutimed® Siltec® B ist auch bei Strahlentherapie einsetzbar.

### Vorteile

- zuverlässiger Halt auch bei stärkeren Bewegungen
- sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches, repositionierbares Anlegen
- bei Strahlentherapie einsetzbar
- duschfest

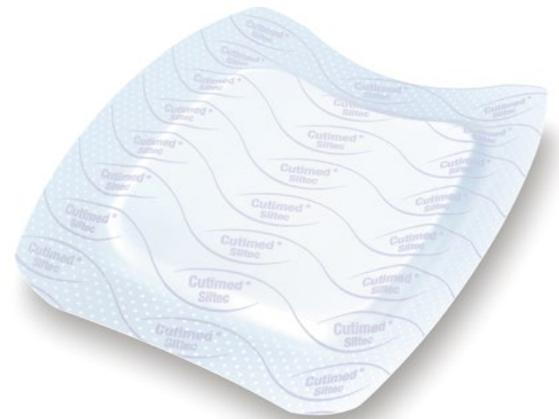

### Anwendung

- schwach bis stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- sekundärheilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

### Verbandwechsel

Kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.



**LATEX FREE FORMULA** Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	Wundaufgabe	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
7328407	7,5 x 7,5 cm	3,9 x 3,9 cm	12	1/10	07340650
7328412	10 x 10 cm	6 x 6 cm	12	1/10	10204198
7328413	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	12	1/10	10204206
7328408	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	12	1/10	07340791
7328409	15 x 15 cm	10 x 10 cm	12	1/10	07340816
7328410	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	6	1/10	07340822
7328411	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	6	1/10	07341253