

Cutimed® Sorbact®

Basis-Sortiment für das Infektionsmanagement

Produkt

Cutimed® Sorbact® ist ein innovativer Wundverband, der Infekte auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpft – rein physikalisch. Cutimed® Sorbact® nutzt die sichere und effektive Sorbact® Technology. Bakterien (MRSA, VRE, u.a.) und Pilze binden und verankern sich auf natürliche Weise an die einzigartige DACC™ beschichtete Oberfläche von Cutimed® Sorbact®. Die Bakterien werden irreversibel gebunden und im Wachstum gehemmt. So wird mit jedem Verbandwechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.


Cutimed® Sorbact® besteht aus Acetat- bzw. Baumwollgewebefasern, welche durch eine bakterienbindende Beschichtung ein effektives Infektionsmanagement bieten.

Vorteile

- keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapieverlauf
- keine bekannten Kontraindikationen

Anwendung

Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten, exsudierenden Wunden:

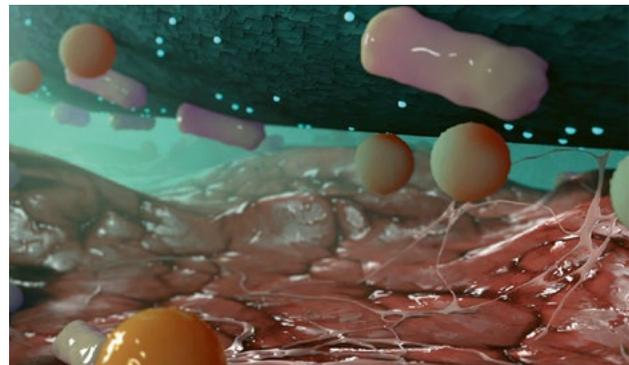

- chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- Hautpilzinfektionen (gilt für die Tamponade)

Verbandwechsel

Abhängig von der Exsudatmenge sowie dem Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, bis zu 7 Tage sofern es der klinische Zustand zulässt



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
Saugkompressen				
7216118	7 x 9 cm	6	1/16	07343275
7216117	7 x 9 cm	42	1/2	07343281
7216220	10 x 10 cm	6	1/16	07343298
7216219	10 x 10 cm	42	1/2	07346948
7216311	10 x 20 cm	24	1/2	07347161
Kompressen				
7216419	4 x 6 cm	6	1/24	07347215
7216418	4 x 6 cm	42	1/6	07348031
7216517	7 x 9 cm	6	1/24	07348640
7216516	7 x 9 cm	42	1/6	07348657
7269309	10 x 100 cm	12	1/6	18599003
Tamponaden				
7216614	2 x 50 cm	12	1/6	15657668
7216612	2 x 50 cm	24	1/6	07351731
7216708	5 x 200 cm	12	1/6	07351808

NEUE BNR
ALTE PZN

NEUE BNR
ALTE PZN

NEUE BNR
ALTE PZN

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB