

Fixomull®

Die vollflächige Verbandfixierung aus zugfestem Viskosemull


Produkt

Mit Fixomull® können großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet, der Träger besteht aus zugfestem Viskosemull und ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie strahlenindifferent. Fixomull® beugt Kontamination vor, ist einfach in der Handhabung und wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet getragen.

Fixomull® ist in Längs- und Querrichtung unnachgiebig zugfest und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Fixomull® besteht aus einem Viskosemullträger, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.

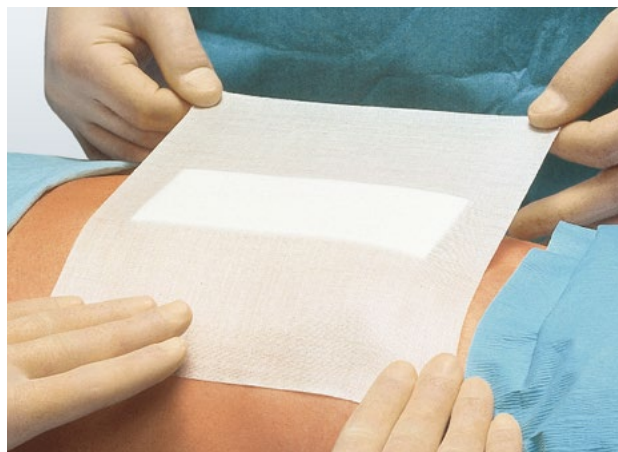

Anwendung

- zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders für großflächige Wundauflagen an wenig konturierten Körperpartien
- für Druck- und Entlastungsverbände



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Bestell-Nr.	Abmessung	BE/VE	PZN
Anstaltspackung mit geschnittenem Abdeckpapier			
0211001	10 m x 10 cm	1/24	01598695
0211101	10 m x 15 cm	1/24	01598703