

# Compat<sup>®</sup> Gravity

## Compat<sup>®</sup> Gravity Universal Set

Das Compat<sup>®</sup> Gravity Universal Set ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Arzneimitteln bestimmt und ist für eine Schwerkraftapplikation geeignet.

### Funktionen auf einen Blick


Das Compat<sup>®</sup> Gravity Universal Set umfasst einen ENPlus Ernährungskonnektor, einen Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter, eine Tropfkammer, eine Rollklemme, einen ENFit<sup>®</sup> Y-Medikamentenport und ein ENFit<sup>®</sup> distales Ende. Ein separater Flaschenaufhänger ist ebenfalls enthalten.

**Patientensicherheit:** Das Compat<sup>®</sup> Gravity Universal Set umfasst ENFit<sup>®</sup> Konnektoren nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektoren nach ISO 18250-3. ENFit<sup>®</sup> und ENPlus-Konnektoren sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlanschlüsse zu vermeiden.

**Sichere Materialien:** Das Compat<sup>®</sup> Gravity Universal Set ist steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei\*.

#### Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus, Glas- und Kunststoff-Weithalsbehälter, Glasflaschen mit Kronkorken
- Enterale Ernährungssonden: ENFit<sup>®</sup>
- Spritzen: ENFit<sup>®</sup>

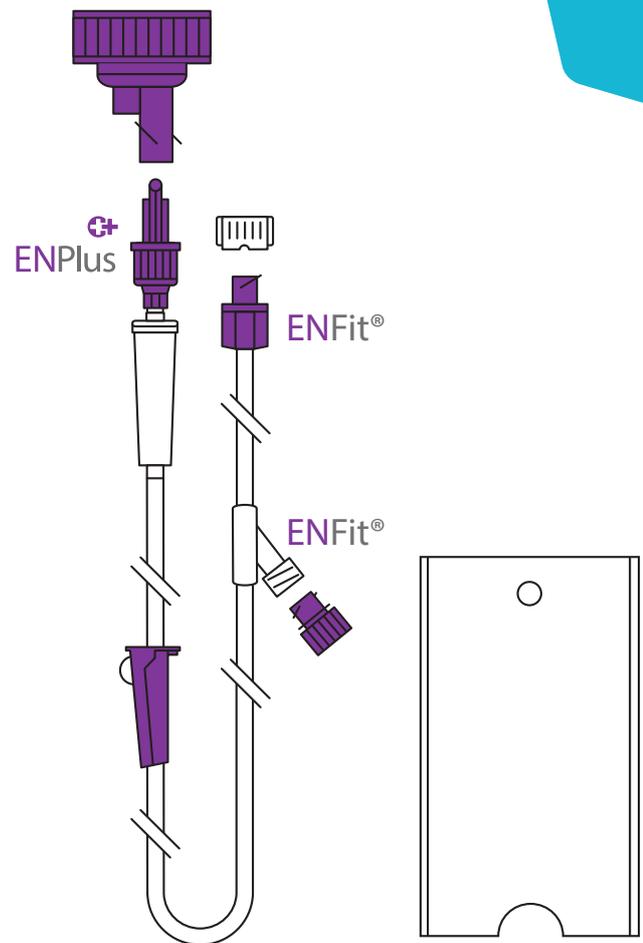


### Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat <sup>®</sup> Gravity Universal Set	12298230	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

# Compat® Gravity Universal Set

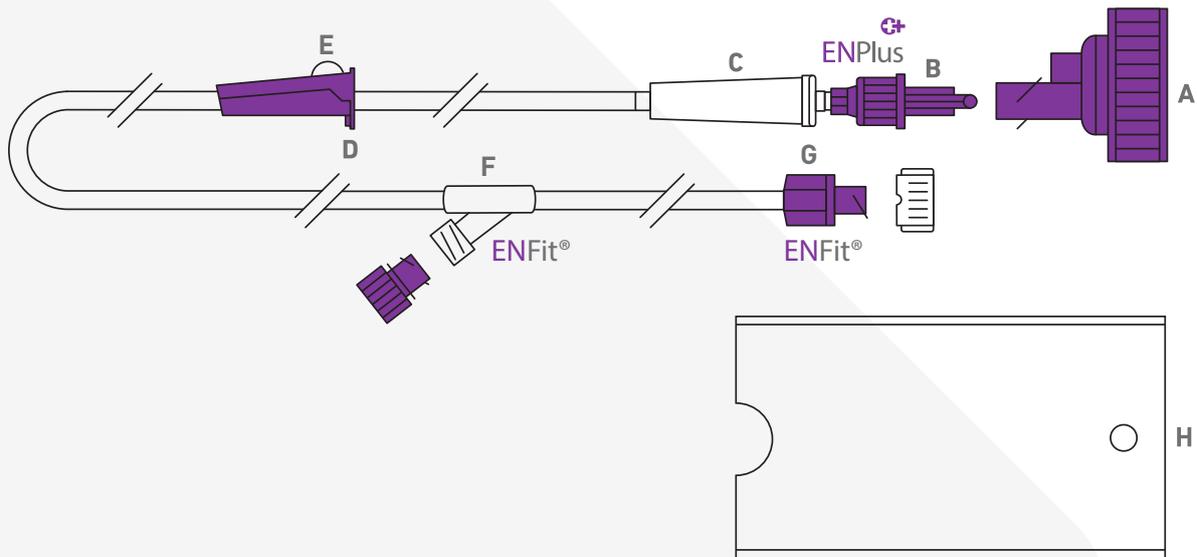

## Komponenten

- A** Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Konnektor passend für Glas- und Kunststoff-Weit-halsbehälter Ø 40 mm (DIN 168-1) oder Glasflaschen mit Kronkorken (EN 14634 und EN 14635)
- B** ENPlus ‚nur enteraler‘ Konnektor mit proximalem Ende (Ernährungskonnektor) mit Drehverschluss
- C** Tropfkammer
- D** Integrierte Aufhängung, um das distale Ende des Überleitsets vor Schmutz zu schützen
- E** Rollklemme zum Abklemmen oder Einstellen der Flussrate
- F** ENFit® Y-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- G** ENFit® Distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)
- H** 500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

## Technische Daten

<b>Steril:</b>	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
<b>Verpackung:</b>	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (39 x 39 x 13 cm).
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
<b>Dauer der Anwendung:</b>	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
<b>Sondenlänge:</b>	Abstand vom Ernährungskonnektor zum patientenseitigen Sondenanschluss: 180 cm.
<b>Durchmesser der Sonde:</b>	Nenn-Innendurchmesser: 4,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 5,4 mm.
<b>ISO-Norm:</b>	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
<b>Klassifizierung:</b>	Klasse Is.
<b>Rechtmäßiger Hersteller:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Nachhaltigkeit:</b>	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
<b>Materialien:</b>	Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
<b>Herkunftsland:</b>	Hergestellt in Italien.

\*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter [www.compat.com](http://www.compat.com)  
\*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.