

Compat® Flexibaggle®

Zusammenfaltbarer 500 ml Leerbeutel für die enterale Ernährung

Der Compat® Flexibaggle® 500 ml ist ein zusammenfaltbarer Leerbeutel mit ENPlus-Port und dient zur enteralen Verabreichung von Nahrung und/oder Flüssigkeiten an Patienten. Zur Verwendung in Verbindung mit Überleitsets.

Funktionen auf einen Blick


Der zusammenfaltbare Leerbeutel Compat® Flexibaggle® 500 ml mit ENPlus-Port ist für eine **verbesserte Patientenversorgung bestimmt**.

Bedienkomfort: Seine selbststehende Eigenschaften und sein Weithals-Port machen ihn sehr **handhabungsfreundlich** und **vermeiden versehentliches Verschütten**. Er ist zusammenfaltbar und **somit platzsparend**, sodass bei Bedarf schnell darauf zugegriffen werden kann.

Ambulante Nutzung: Jeder Port des Compat® Flexibaggle® 500 ml umfasst einen festen Schraubverschluss, um **ein Auslaufen zu vermeiden**, sodass er ideal für die ambulante Pflege eingesetzt werden kann, beispielsweise in Kombination mit dem Compat Ella® Rucksack.

Patientensicherheit: Compat® Flexibaggle® 500 ml besitzt einen ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3. Der ENPlus-Konnektor ist mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlschlüsse zu vermeiden. Der Compat® Flexibaggle® besteht aus Polyethylen, einem lebensmitteltauglichen Material. Er ist auch **steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei***.

Umweltfreundlich: Der Compat® Flexibaggle® 500 ml ist zusammenfaltbar und **reduziert somit die Umweltauswirkungen** beim Versand.

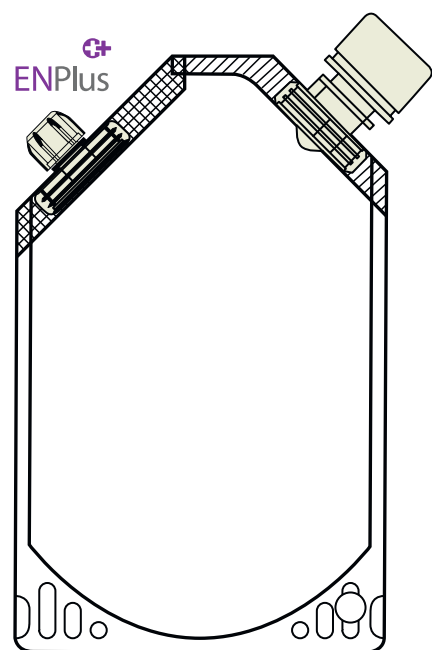


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Zusammenfaltbarer 500 ml Leerbeutel für die enterale Ernährung

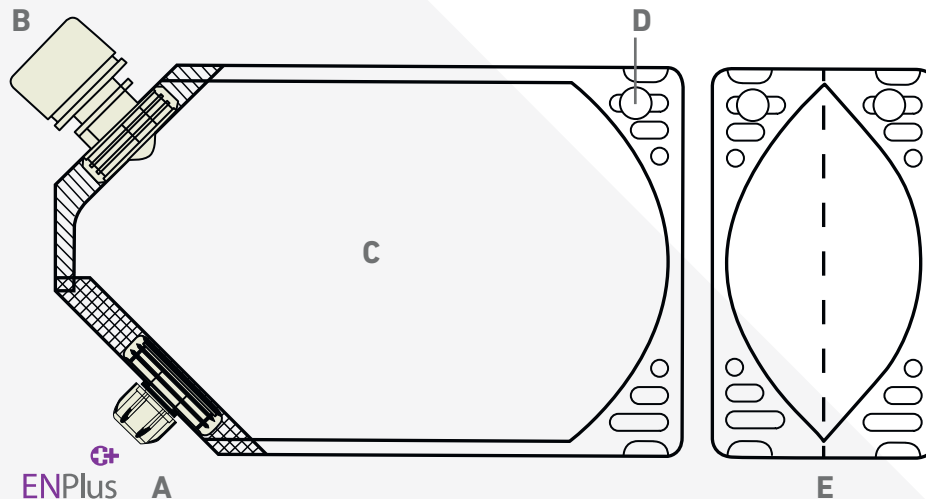

Komponenten

- A** ENPlus ‚nur enteraler‘ Ernährungsport mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- B** Weithals-Füllport und Verschlusskappe mit Schraubverschluss
- C** Flexibaggle® 500 ml Behälter mit Graduierungen (250 und 500 ml) und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen (Formel, Flussrate und Datum)
- D** Befestigungspunkt für Schraubhalterung
- E** Zusammenfaltbarer freistehender Sockel für Beutel mit Blick von unten

Technische Daten

Weithals-Port:	Nenn-Innendurchmesser: $\pm 21,5$ mm.
Beutelgröße:	Max. Nenn-Beutelgröße: $\pm 130 \times 210$ mm.
Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzeln verpackt in Kartons zu je 30 Stück (29,5 x 25 x 17 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
ISO-Norm:	ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse Is.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Beutel: PE (Polyethylen). DEHP-, BPA- und latexfrei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.